



# Raka vägen till slutlig restauration

TEMPSMART™ DC  
från GC

Dualhärdande komposit för  
temporära kronor och broar

**GC**

# TEMPSMART DC från GC

## Starkt och snabbt. En briljant innovation!

Den temporära restaurationen spelar en viktig roll. Den skyddar den preparerade tanden och förstärker patientens upplevelse av god **passform och estetik** i väntan på den slutliga restaurationen. Med TEMPSMART DC introducerar GC ny teknik som gör de temporära materialen smartare. TEMPSMART DC är **det första dualhärdande temporära materialet som inte innehåller mjukgörande medel och som både underlättar tandläkarens arbete och gör det mer angenämt.**


### Välj den SMARTA vägen

TEMPSMART DC kan **ljushärdas** vilket har flera fördelar: du har full kontroll på stelningen samtidigt som slutpolymerisationen optimeras. Det bidrar till en **enklare och effektivare** procedur som kan **spara mycket tid**. Ljushärdning förbättrar även den temporära restaurationens fysikaliska egenskaper, särskilt böjhållfastheten



Extraoral ljushärdning.

Procedurtid för TEMPSMART DC i jämförelse med konkurrerande produkter (min).

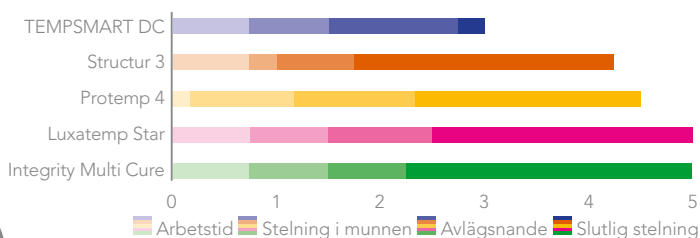


Källa: GC R&D, Japan 2018, Data on file.

### Välj den SÄKRA vägen

Långa polymerkedjor bildar **ett nätverk av polymerer med hög densitet** vilket resulterar i en ovanligt **hög brottseghet**. Det gör materialet lämpligt för långsiktig temporär användning och för längre broar.

Brottseghet i jämförelse med konkurrerande produkter (MPa·m<sup>1/2</sup>)

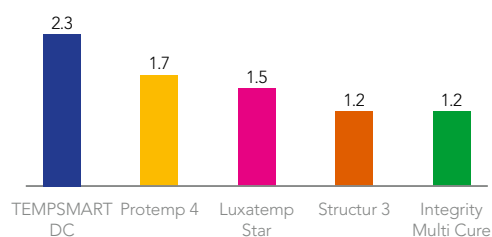

Källa: GC R&D, Japan 2018, Data on file.

### Välj den ENKLA vägen

TEMPSMART DC tillhandahålls i **1:1-system** och innehåller inte mjukgörande medel. Det ger utmärkta polymeriseringsegenskaper med hårda och **släta ytor som inte kladdar** nästan helt utan syreinhärdnings skikt. Det gör att gingivan läker bättre och att plack enkelt kan avlägsnas.



Jämförelse mellan traditionell 10:1-patron med mjukmedel (vänster) och resultatet med 1:1-patron med TEMPSMART DC utan mjukmedel (höger).



Hög brottseghet gör materialet idealiskt för posteriora broar

1. Ursprunglig situation.
2. TEMPSMART DC appliceras i avtrycket.
3. Avtrycket avlägsnas 2.00–2.30 minuter efter blandningsstart. Ljushårdning i 5 sekunder per yta efter att överskott avlägsnats.
4. Efter polering: brocementering med Freegenol eller Fuji TEMP LT.



Med tillstånd av dr. C. Lampson, Tyskland

## GLÄDS med din patient!

Tack vare den kladdfria ytan uppnås fantastiska resultat med polering i få steg

1. Ursprunglig situation.
2. Efter applicering av TEMPSMART DC och placering i munnen kan restaurationen avlägsnas inom 2.30 minuter och ljushärdas.
3. Slutpolering av restaurationen i få steg.
4. Slutlig temporär restauration med högglossig yta.



Med tillstånd av dr. J. Tapia Guadix, Spanien

## Välj den VACKRA vägen

TEMPSMART DC finns i **6 färger**, alla med **naturlig fluorescens**. Tack vare smart fillerteknik kan materialet **enkeltpoleras** till utmärkt **höggloss**.



Välj mellan höggloss med manuell polering eller karakterisering med hjälp av GC:s nanofillerförstärkta OPTIGLAZE-färger.



# TEMPSMART DC från GC

Raka vägen till slutlig restauration

## Välj den SMARTA vägen

Kort procedurtid tack vare ljushårdning.



TEMPSMART DC, 48 ml-patron, 16 blandningsspetsar						
Art. nr.	12760	12761	12762	12763	12764	12765
Färg	A1	A2	A3	A3,5	B1	BW

## Välj den SÄKRA vägen

Hög brottseghet ger temporära fyllningar som håller.

## Välj den ENKLA vägen

Kladdfria restaurationer ger höglans i få steg.

## Välj den VACKRA vägen

Fluorescens och bestående höglans gör patienten glad.



TEMPSMART DC, 10 ml-patron, 10 blandningsspetsar				
Art. nr.	12766	12767	12768	12769
Färg	A1	A2	A3	B1

## Relaterade produkter



Rebasering

Unifast III



Reparation

G-aenial Universal Injectable



Karakterisering

OPTIGLAZE color



Temporär cementering

FREEGENOL Fuji TEMP LT



Kronborttagning

PLIERS

Freegenol, G-aenial Universal Injectable, OPTIGLAZE Color, FREEGENOL, Fuji Temp LT, UNIFAST Trad och PLIERS är varumärken som tillhör GC. Integrity Multi Cure, Luxatemp Star, Protemp 4 och Structur 3 är varumärken som inte tillhör GC.

**GC EUROPE N.V.**  
Head Office  
Researchpark  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33  
B-3001 Leuven  
Tel. +32.16.74.10.00  
Fax. +32.16.40.48.32  
info.gce@gc.dental  
<http://www.gceurope.com>

**GC Nordic AB**  
Strandvägen 54  
S-193 30 Sigtuna  
Tel.: 0768.544.350  
info.nordic@gc.dental  
<http://nordic.gceurope.com>